





造影用耐圧チューブ

CT用エクステンションチューブ

デュアル用(生食水側・造影剤側逆止弁付)／延長チューブ連結／三方活栓付)

特長

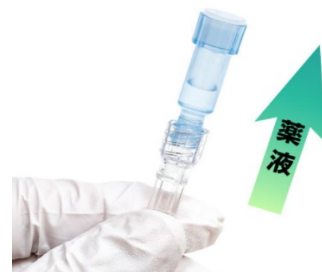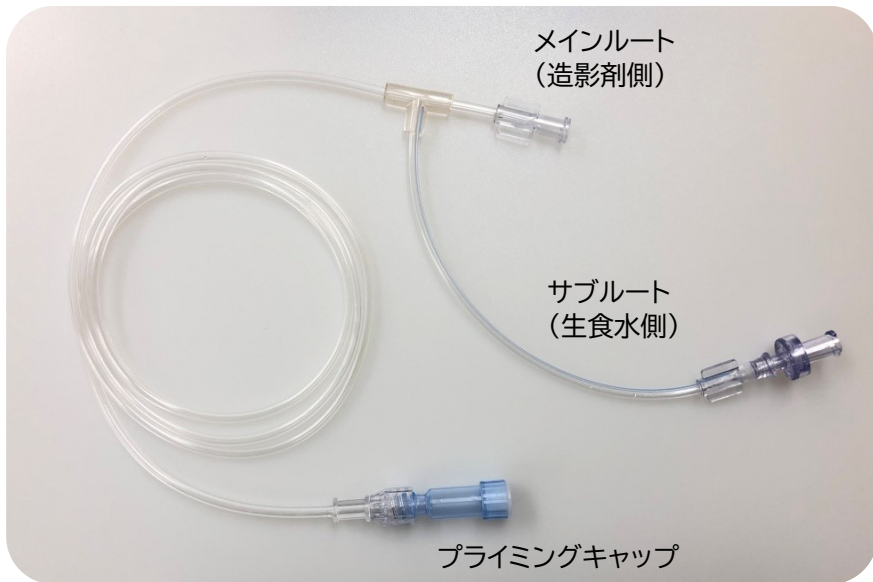

プライミングキャップ使用方法


プライミングキャップの先端を、上向きにしてセッティングしてください。

そのまま薬液を送液してルート内を満たします。キャップからエアのみ排出されて、余剰液はキャップ内に納まります。

液垂れすることなく清潔にご使用できます。

仕様

デュアル用(生食水側逆止弁付)

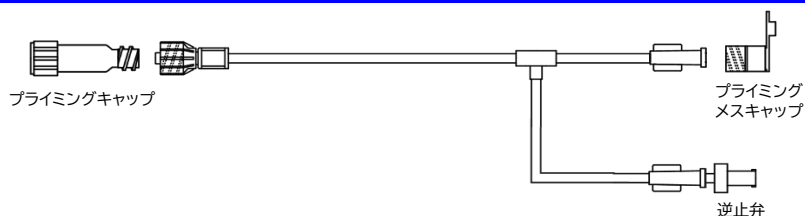

型式	長さ(mm)	内容量(ml)	内径×外径(mm)	プライミングメスキャップ	耐圧性能	入数(箱)	JANコード
FGM-CTY-600P	600	1.4	1.5×3.0	無し	1.47MPa (213psi)	200本 (50本入×4)	4547319471986
FGM-CTY-1000P	1000	2.0		無し			4547319471719
FGM-CTY-1000PP	1000	2.0		有り			4547319471726
FGM-CTY-1000PP3	1000 (サブルート300mm)	2.3	有り	4547319472020			
FGM-CTY2-1000P	1000	4.6	2.2×3.8	無し			4547319471917
FGM-CTY-1500P	1500	2.9	1.5×3.0	無し			4547319471795
FGM-CTY-1500PP	1500	2.9		有り			4547319471801
FGM-CTY-1500PP3	1500 (サブルート300mm)	3.2		有り			4547319472365
FGM-CTY2-1500PP	1500	6.6	2.2×3.8	有り			4547319472341
FGM-CTY-2000P	2000	3.8	1.5×3.0	無し	4547319471856		



フォルテ グロウ メディカル 株式会社


デュアル用(造影剤側逆止弁付)



型 式	長さ(mm)	内容量(ml)	内径×外径(mm)	プライミングメスキャップ	耐圧性能	入数(箱)	JANコード
FGM-CTY-1000RP	1000	2.0	1.5×3.0	無し	1.47MPa (213psi)	200本 (50本入×4)	4547319471740
FGM-CTY-1500RPP	1500	2.9		有り			4547319471832
FGM-CTY-2000RP	2000	3.8		無し			4547319471887
FGM-CTY-2000RPP	2000	3.8		有り			4547319471894


※●は受注生産品です

デュアル用(三方活栓付き延長チューブ連結)

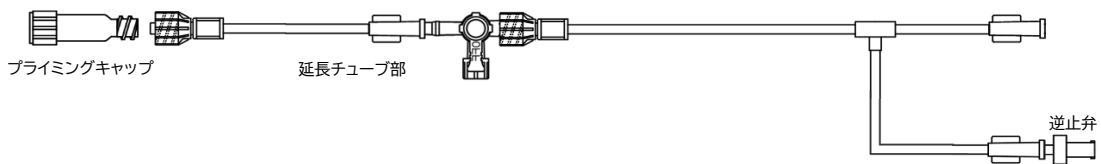

型 式	長さ(mm)	内容量(ml)	内径×外径(mm)	プライミングメスキャップ	耐圧性能	入数(箱)	JANコード
FGM-CTY-125-CVP	1000 延長チューブ部 +250	2.4	1.5×3.0	無し	1.47MPa (213psi)	200本 (50本入×4)	4547319471764
FGM-CTY-160-CVP	1000 延長チューブ部 +600	3.1		無し			4547319472372

デュアル用(三方活栓付き)

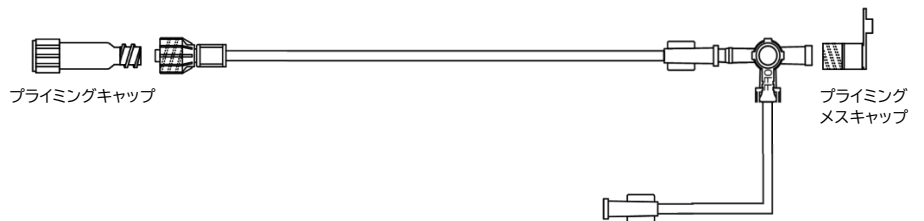

型 式	長さ(mm)	内容量(ml)	内径×外径(mm)	プライミングメスキャップ	耐圧性能	入数(箱)	JANコード
FGM-MR1500PP	1500	2.9	1.5×3.0	有り	1.47MPa (213psi)	200本 (50本入×4)	4547319472006
FGM-MR2000PP	2000	3.8		有り			4547319472013

※●は受注生産品です

●使用上の注意事項

- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2)包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3)水ぬれに注意し、直射日光を避け、高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4)本製品は医療用 Disposable 製品です。1回限りの使用にしてください。
- 5)形状および仕様は予告なく変更する場合があります。

一般的名称：造影用耐圧チューブ
販売名：CT用エクステンションチューブ
認証番号：302AABZX00018000

製造販売業者



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

本 社 栃木県佐野市大橋町1647番地
東京営業所 TEL:03-3863-1901 FAX:03-3683-1905
<https://www.fgm.co.jp/>

販売元



ORTメディカル株式会社

本社営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19竹生第2ビル9F
TEL:045-534-7015 FAX:045-534-7760
大阪営業所 TEL:06-6476-7300 FAX:06-6476-7289
<https://www.ort-medical.jp/>

取扱販売店